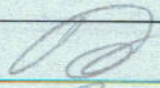


Testeo General del Equipo		ELGA  VEOLIA		Servicio N°:					
				00021617					
Cliente: <u>SWISS CATAMARCA</u>				Fecha: <u>11/11/2020</u>					
Contacto:		Tipo: <u>MENSUAL</u>		Serie: <u>77120/2252</u>					
Dirección: <u>CATAMARCA 1242 - CABA</u>		svo:		S1: <u>EQUIPO (B)</u>					
Sector: <u>LAB. CENTRAL - 2° Piso</u>		Remito N°:		S1 Mat: <u>ABBOIT</u>					
Solo Medica R/D 7/15		Solo Medica Pro/Centra 30/60/120		Solo Medica/Centra R200					
Contador de horas		Fecha cambió de consumibles		Fecha cambió de consumibles					
LC 141	LC 105	LC 177	03/21	LC 174	04/21				
LC 125	LC 154	LC 109	03/21	LC 136	03/21				
LC 140	LC 136	LC 105	09/21	LC 175					
				LC 156	LC 160				
				LC 158					
				LC 159					
Datos comunes a ambos equipos									
Cloro libre Alimentación:		ppm/mV	Filtro Malla alimentación solo R15 y Pro:	Si	No				
Conductividad alimentación:		uS/cm	Filtro Malla Loop solo R15 :	Si	No				
Temperatura:		26.8 °C	Consumo bomba de alta:		A				
Tensión alimentación:		220 v	Consumo bomba de Recirculación:		A				
Tensión fuente de alimentación:		24 v	Tensión Bomba Recirculación:		v				
Estado general del filtro de alimentación:		(Si) No	Nivel de ruido bomba de alta:	Si	No				
Presión alimentación:		2.2 Bar	Nivel de ruido bomba de recirculación:	Si	No				
Presión bomba de alta:		8 Bar	Control de cierre de la válvula de alim.:	Si	No				
Presión Loop:		1.1 Bar	Acceso para el mantenimiento adecuado:	Si	No				
Conductividad RO:		010 uS/cm	Drenaje optimo para el equipo:	Si	No				
Conductividad Loop:		2.067 uS/cm	El cliente requiere cambio en la programación:	Si	No				
Caudal permeado:		02.1 L/min	Limpiar los contactos LC174 y LC177 Pro y Centra:	Si	No				
Caudal Loop:		L/min	Caudal concentrado:		L/min				
Recomendaciones									
Se Realizó MANTENIMIENTO MENSUAL en equipo									
Se Realizó DESINFECCIÓN RO. Se controlaron									
PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO Y ESTADO									
GENERAL DE SISTEMA MICROFILTRO CON VIDA									
UTIL. SISTEMA OPERATIVO.									
Insumos utilizados									
CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
Resultado del servicio:		Muy Satisfactorio:		Satisfactorio:		Poco Satisfactorio:			
Hora Inicio: <u>08:00 hr</u>				Hora Fin:					
Firma Técnico: 				Firma Cliente: 					
Aclaración: <u>Problema Marcos</u>				Aclaración: <u>9/11/2</u>					
Call center Servicio Técnico (único numero para recepción de solicitudes y reclamos) Días hábiles de 9 a 18 hs. 0011-52986200 Int: 6283 Mail para solicitud de materiales: stockelga@veolia.com Pedido de servicio técnico, dudas, comentarios y sugerencias ar.vwt.cus.support@veolia.com					Sábados, domingos y feriados 24hs Lunes a Viernes de 18 a 9.00 hs 011 1535805695 (Los mensajes serán respondidos dentro de las 3 horas de recibidos) Tiempos de respuesta: Abono Premium 72hs. Abono Premium Oro 48hs.				