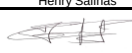


MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONDIS				IC-CTE-F421	
				Versión:	2
				Vigencia:	sep-24
Equipo: CEN-MON-LABCAT		Modelo: Mondis		Edificio:	Catamarca 1242
				Sector:	Laboratorio
				Ubicación:	Catamarca 1242 - 01 - 02 - 03
N° serie: VARIOS		Marca: DSNTec		Fecha:	06/09/2024
				Orden M:	
				Realizó:	Henry Salinas
Instrumental utilizado	Marca	Modelo	N° de serie	Fecha Ult.	
Termómetro	Madgetech	OctTemp2000	P93230	13/05/2024	
Estado de valoración (marcar con X lo que corresponda)					
Inspección superada, el equipo es apto para el uso					P
El equipo ha necesitado reparación					NA
El equipo no está reparado. No se puede usar					NA
Comentarios:					NA

Puntos de inspección	

8.1	Test de Inspección y Funcionalidad Marcar P (Pasó) o F (Falló) según corresponda			
8.1.1	Sensores			P
8.1.2	Ubicación de los sensores			P
8.1.3	Vainas de sensores			P
8.1.4	Cables UTP			NA
8.1.5	Interfaces LAN			NA
8.1.6	Fuentes de alimentación			NA
8.2.1	Características del termómetro patrón			Error permitido
	Incertidumbre de calibración (Up) (Hasta -70°C)	0.18	°C	2
	Incertidumbre de calibración (Up) (-20 10°C)	0.14	°C	2
	Incertidumbre de calibración (Up) (29°C)	0.11	°C	2
	Resolución (rp)	0.01	°C	
8.2.2	Características del termómetro a calibrar			
	Error permitido	2	°C	
	Resolución (rx)	0.0625	°C	

Ubicación Sensor	Sensor	Sensor	Patron	Paso o fallo	Incertidumbre combinada expandida (Uc)	Error sistemático (ES)	Error total en la medida del termómetro a calibrar (ETx)	Correccion
Sensor Mondis		-16.2	-16.2					
Freezer 1	8C000005B3B69428	-16.2	-16.6	Paso	0.443936294	0.16333333	0.607269628	-0.16333333
Piso 1		-16.2	-16.29					
Sensor Mondis		-18.1	-16.75					
Freezer 2	A9000005683C5728	-18.2	-15.25	Paso	1.77133079	1.86666667	3.637997456	1.86666667
Piso 1		-18.1	-16.8					
Sensor Mondis		-16.4	-15.73					
Freezer 3	30000005632D2828	-16.5	-15.8	Paso	0.231544308	0.69	0.921544308	0.69
Piso 1		-16.5	-15.8					
Sensor Mondis		-19.5	-17.73					
Freezer 4	0D0000075F4A1F28	-19.6	-17.73	Paso	0.231544308	1.81333333	2.044877642	1.81333333
Piso 1		-19.6	-17.8					
Sensor Mondis		-16.71	-14.9					
Freezer 5	BC000005B4261128	-16.76	-15.1	Paso	0.302014514	1.69	1.992014514	1.69
Piso 1		-16.7	-15.1					
Sensor Mondis		-17	-16.7					
Freezer 6	68000005685A728	-16.7	-16.07	Paso	0.88333427	0.27666667	1.160000937	0.27666667
Piso 1		-16.7	-16.8					
Sensor Mondis		-14.5	-15.38					
Freezer 7	7600000C7C702628	-14.6	-15.98	Paso	1.63107718	1.54666667	3.17743847	-1.54666667
Piso 1		-14.6	-16.98					
Sensor Mondis		3.7	3.7					
Heladera 1	0200000C79453D28	3.4	3.6	Paso	0.408753512	0.13333333	0.542086845	0.13333333
Piso 1		3.4	3.6					
Sensor Mondis		37.2	37.5					
Baño term. 26353	1C00000C79DE9A28	37.2	37.2	Paso	0.392104705	0.1	0.492104705	0.1
Piso 1		37.2	37.2					
Sensor Mondis		34.5	34.5					
Estufa 27500	BF00080276274010	34.5	34.5	Paso	0.216977956	0.03333333	0.250311289	-0.03333333
Piso 1		34.6	34.5					
Sensor Mondis		20.4	20.3					
Ambiente	7900000567979E28	20.4	20.3	Paso	0.216977956	0.06666667	0.283644623	-0.06666667
Piso 1		20.4	20.4					
Sensor Mondis		-18.51	-18.2					
Freezer 1	7500000568F5B828	-17.8	-18.21	Paso	0.888526552	0.20333333	1.091859885	-0.20333333
Piso 2		-17.71	-18.22					
Sensor Mondis		-18.72	-20.3					
Freezer 2	C500000568BF4128	-18.34	-20.4	Paso	0.558103425	1.70333333	2.261436759	-1.70333333
Piso 2		-18.83	-20.3					
Sensor Mondis		4.38	3.9					
Heladera 1	DC000007605B1928	3.97	3.8	Paso	0.619041813	0.19	0.809041813	-0.19
Piso 2		3.82	3.9					
Sensor Mondis		4.28	4.5					
Heladera 2	1400000567D05328	4.29	4.6	Paso	0.217897759	0.27666667	0.494564426	0.27666667
Piso 2		4.3	4.6					
Sensor Mondis		4.7	4.4					
Heladera 3	F100000567B8FA28	4.8	4	Paso	0.44374854	0.52	0.96374854	-0.52
Piso 2		4.76	4.3					
Sensor Mondis		4.72	3.9					
Heladera 4	61000005A054B228	4.49	4.3	Paso	0.577332458	0.62666667	1.203999124	-0.62666667
Piso 2		4.87	4					
Sensor Mondis		5.65	6.8					
Heladera 5	3700000568630A28	7.61	6.8	Paso	2.003391982	0.09333333	2.096725315	0.09333333
Piso 2		6.96	6.9					
Sensor Mondis		45.3	45.3					
Ambiente Humedad	310001000033AA7E	45.3	45.3	Paso	0.163644228	0.03333333	0.196977561	-0.03333333
Piso 2		45.3	45.2					
Sensor Mondis		24.28	23.5					
Ambiente 2C	D500080250F4D610	24.36	23.6	Paso	0.244906989	0.71666667	0.961573656	-0.71666667
Piso 2		24.31	23.7					
Sensor Mondis		-19.1	-19.1					
Freezer 1	7400000C7BB85628	-19.2	-19.1	Paso	0.163644228	0.03333333	0.196977561	0.03333333
Piso 3		-19.1	-19.1					
Sensor Mondis		-16.5	-14.48					
Freezer 2	3A00000567D00328	-16.3	-14.95	Paso	0.633492515	1.54	2.173492515	1.54
Piso 3		-16.2	-14.95					
Sensor Mondis		23.5	-22.5					
Freezer 3	2F00080251061C10	-23.5	-22.3	Paso	0.231184126	1.1	1.331184126	#¡VALOR!
Piso 3		-23.5	-22.4					
Sensor Mondis		-23.1	-20.86					
Freezer 4	4F000005A0109028	-23.1	-23.05	Paso	2.543064968	0.77333333	3.316398302	0.77333333
Piso 3		-23.1	-23.07					

Sensor Mondis	EE001000002E617E	-72.9	-71.2	Paso	0.632544676	1.9	2.532544676	1.9
CrioFreezer 4		-73.3	-71.5					
Piso 3		-73.3	-71.1					
Sensor Mondis	740000056723BB28	4.4	5.25	Paso	0.634806611	0.92166667	1.556473278	-0.89666667
Heladera 1		4.6	5.66					
Piso 3		4.6						
Sensor Mondis	520000075F7FD628	4.9	6.87	Paso	2.717764909	1.01	3.727764909	-0.96
Heladera 3		4.9	4.95					
Piso 3		4.9						
Sensor Mondis	2900010000337E7E	19.3	19.3	Paso	0.283041987	0.03333333	0.316375321	-0.03333333
Ambiente Humedad		19.3	19.3					
Piso 3		19.5	19.4					