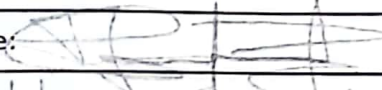


Testeo General del Equipo		ELGA  VEOLIA		Servicio N°:					
				00036062					
Cliente: <u>Surco Medical</u>				Fecha: <u>08/07/20</u>					
Contacto:		Modelo: <u>MP 120</u>		Diagnostica: <u>ABQ</u>					
Dirección: <u>Cruz mora 1242</u>		N° Serie: <u>MP0003507</u>		S1: <u>---</u>					
Sector: <u>Lab. 2º Piso</u>		Tanque: <u>---</u>		Remito: <u>---</u>					
Tipo Serv: <u>Mantenimiento mensual</u>		N° Serie: <u>---</u>		SVO: <u>---</u>					
Solo Medica R/D 7/15		Solo Medica Pro/Centra 30/60/120		Solo Medica/Centra R200					
Contador de horas		Fecha cambió de consumibles		Fecha cambió de consumibles					
LC 141	LC 105	LC 177	LC 174	LC 156	LC 160				
LC 125	LC 154	LC 109	LC 136	LC 158					
LC 140	LC 136	LC 105	LC 175	LC 159					
RO CICLOS		40949		VOL TOTAL					
				1214923					
Datos comunes a ambos equipos									
Cloro libre Alimentación:		ppm/mV		Filtro Malla alimentación solo R15 y Pro:					
Conductividad alimentación:		uS/cm		Filtro Malla Loop solo R15:					
Temperatura:		18 °C		Consumo bomba de alta:					
Tensión alimentación:		220 V		Consumo bomba de Recirculación:					
Tensión fuente de alimentación:		24 V		Tensión Bomba Recirculación:					
Estado general del filtro de alimentación:		(Si) No		Nivel de ruido bomba de alta:					
Presión alimentación:		5 Bar		Nivel de ruido bomba de recirculación:					
Presión bomba de alta:		5.8 Bar		Control de cierre de la válvula de alim.:					
Presión Loop:		1.11 Bar		Acceso para el mantenimiento adecuado:					
Conductividad RO:		13 uS/cm		Drenaje optimo para el equipo:					
Conductividad Loop:		0.116 → 0.067 uS/cm		El cliente requiere cambio en la programación:					
Caudal permeado:		1.8 L/min		Limpiar los contactos LC174 y LC177 Pro y Centra:					
Caudal Loop:		L/min		Caudal concentrado:					
Recomendaciones									
- Se realizó mantenimiento mensual - Se controla presiones y flujos - Se realizó sujeción RO - Se cambia Microfiltro - se cambia LC 174 - Se cambia manguera desde salida microfiltro/entrada del equipo - Se limp. filtro mesh - Equipo operativo									
Insumos utilizados									
CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
1	Microfiltro	X							
2mt	FTUPE		310						
1	LC 174	1							
Resultado del servicio:		Muy Satisfactorio:		Satisfactorio:		Poco Satisfactorio:			
Hora Inicio:		13:15		Hora Fin:					
Firma Técnico:				Firma Cliente:					
Aclaración:		Unidades		Aclaración:		Henry (Técnico)			
Call center Servicio Técnico (único número para recepción de solicitudes y reclamos) Días hábiles de 9 a 18 hs. 0011-52986200 Int.: 6283 Mail para solicitud de materiales: stockelga@veolia.com Pedido de servicio técnico, dudas, comentarios y sugerencias ar.vwt.cus.support@veolia.com					Sábados, Domingos, y feriados 24 hs. Lunes a Viernes 18 a 9.00 hs. 011 1535805695 (Los mensajes serán respondidos dentro de las 3 horas de recibidos) Tiempos de respuesta: Abono Premium 72hs. Abono Premium Oro 48hs.				